

REVIVATOR®

Resucitadores Manuales



REVIVATOR® Plus

Silicona + Polisulfona



REVIVATOR® Res-Q

Silicona + Policarbonato



HERSILL

Medical Devices

REVIVATOR®

Resucitador manual de fácil manejo, gran sensibilidad al tacto y larga durabilidad.
La rotación de 360° de la mascarilla y de la válvula paciente permite ventilar cómodamente desde cualquier posición.
Todos los componentes están fabricados con productos de alta calidad, superando con creces las pruebas más exigentes.

REVIVATOR® Plus

- Fabricado en silicona y polisulfona esterilizables en agentes fríos habituales y autoclave a 134 °C.
- Incluye un puerto para colocar un manómetro de presión de 0-60 cmH₂O para controlar la presión de la vía aérea.

REVIVATOR® Res-Q

- Fabricado en silicona y policarbonato esterilizables en agentes fríos habituales y autoclave a 121 °C.

Especificaciones técnicas

	Adulto	Niño	Bebé
• Resucitador	1700 mL	750 mL	300 mL
• Volumen tidal máximo	1000 mL	500 mL	200 mL
• Válvula limitadora de presión	6 kPa = 60 cmH ₂ O	4.5 kPa = 45 cmH ₂ O	4.5 kPa = 45 cmH ₂ O
• Frecuencia respiratoria	40 respiraciones/min	50 respiraciones/min	90 respiraciones/min
• Dimensiones extendido	310 x 130 mm	257 x 103 mm	228 x 80 mm
• Dimensiones plegado	125 x 90 mm	125 x 85 mm	
• Peso	341 g	246 g	233 g

Aplicaciones

- **Ventilación controlada con aire ambiente:**
(Fig.1) sin reservorio ni conexión a una fuente de oxígeno, se obtiene un 21% de concentración de O₂.

- **Ventilación controlada con oxígeno suplementario. La concentración de oxígeno varía dependiendo de 4 factores:**

1. (Fig.2) si solo se usa el resucitador sin reservorio de O₂ o (Fig.3) con reservorio de O₂.
2. El flujo de oxígeno.
3. El volumen tidal.
4. La frecuencia respiratoria.

Por ejemplo: con el Revivator adulto, 10 L/min de oxígeno, 600 mL de volumen tidal y 12 respiraciones por minuto, se alcanza en 80 segundos una concentración de O₂ del 57% sólo con la bolsa del resucitador y del 100% con la bolsa del resucitador + el reservorio de O₂.

(Fig.4) con reservorio de O₂ y tubo corrugado (normalmente se utiliza la mascarilla con un arnés y anillo de fijación).

Fig. 1

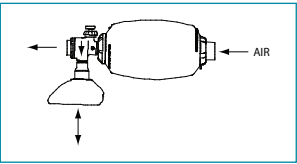


Fig. 2

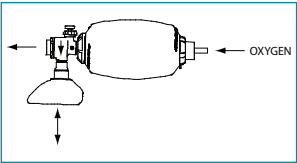


Fig. 3


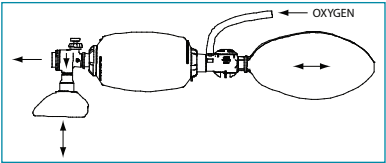


Fig. 4



Otras configuraciones

- Ventilación con válvula PEEP normalizada (adulto y niño).
- Control de presión de la vía aérea mediante un manómetro (Plus).

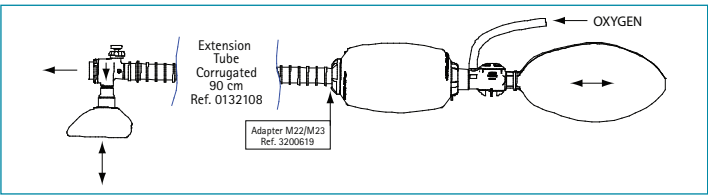

REVIVATOR® Plus



Adulto
5200602



Niño
5200612



Bebé
5200622



Adulto
5200601
Niño
5200611
Bebé
5200621



Set

Adulto
5200600
Niño
5200610
Bebé
5200620

Mascarillas de silicona



REVIVATOR® Res-Q



Adulto
5200702



Niño
5200712



Adulto
5200701
Niño
5200711



Set
Adulto 5200700 Niño 5200710

Bolsas reservorio O₂



Válvulas reservorio O₂



Mascarillas de PVC



Referencias para pedidos

	Adulto > 30 Kg			Niño 7-30 Kg			Bebé < 7 Kg		
	Revivator	Revivator + reservorio	Set	Revivator	Revivator + reservorio	Set	Revivator	Revivator + reservorio	Set
REVIVATOR Plus REVIVATOR Res-Q	5200602 5200702	5200601 5200701	5200600 5200700	5200612 5200712	5200611 5200711	5200610 5200710	5200622	5200621	5200620
Resucitador 1700 mL	● ●	● ●	● ●						
Resucitador 750 mL				● ●	● ●	● ●			
Resucitador 300 mL							●	●	●
Manómetro de presión 0-60 cmH ₂ O							●	●	●
Mascarilla silicona nº 5	●	●	●						
Mascarilla silicona nº 3				●	●	●			
Mascarilla silicona nº 1							●	●	●
Mascarilla silicona nº 0									●
Cúpula rígida para mascarillas nº 4 y 5	●	●	●						
Cúpula rígida para mascarilla nº 3				●	●	●			
Mascarilla PVC nº 6	●	●	●						
Mascarilla PVC nº 3				●	●	●			
Alargadera de O ₂	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●
Válvula reservorio de O ₂		● ●	● ●		● ●	● ●		●	●
Reservorio de O ₂ de 2500 mL		● ●	● ●		● ●	● ●			
Reservorio de O ₂ de 500 mL								●	●
Cánula Guedell nº 5			● ●						
Cánula Guedell nº 3			● ●			● ●			
Cánula Guedell nº 1						● ●			●
Cánula Guedell nº 0									●
Estuche rígido de transporte			● ●			● ●			●

Accesorios y repuestos

 3200502 Válvula PEEP 5-20 cmH ₂ O (adulto) 3200501 Válvula PEEP 2-10 cmH ₂ O (niño)	 3200630 Manómetro de presión 0-60 cmH ₂ O (opcional para adulto y niño)	 4200601 Válvula paciente adulto (Plus) 4200602 Válvula paciente niño/bebé (Plus) 4200701 Válvula paciente adulto (Res-Q) 4200702 Válvula paciente niño/bebé (Res-Q)
 3200619 Adaptador M22/M23 para tubo corrugado  0132117 Tubo corrugado (40 cm)  0132108 Tubo corrugado (90 cm)  0131344 Arnés  0140015 Anillo de sujeción para arnés 4200603 Kit de reparación	 3200050 Estuche de nylon con cremallera	 0200032 Estuche rígido en polipropileno (vacío)



HERSILL
Medical Devices

HERSILL, S.L.
Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves
28935 Móstoles, Madrid, SPAIN
Tel.: +34 91 616 60 00 • Fax: +34 91 616 48 92
info@hersill.com • export@hersill.com
www.hersill.com

EN ISO 10651-4:2002
Biocompatibility tested



Nº de folleto
ES-52006/13/02