

Références pour les commandes

	Adulte >30 kg			Enfant 7-30 kg			Nouveau-nés <7 kg		
	REVIVATOR®	REVIVATOR® + réservoir	Set	REVIVATOR®	REVIVATOR® + réservoir	Set	REVIVATOR®	REVIVATOR® + réservoir	Set
REVIVATOR® Plus REVIVATOR® Res-Q	5200602 5200702	5200601 5200701	5200600 5200700	5200612 5200712	5200611 5200711	5200610 5200710	5200622	5200621	5200620
Insufflateur 1700 mL	● ●	● ●	● ●						
Insufflateur 750 mL				● ●	● ●	● ●			
Insufflateur 300 mL							●	●	●
Manomètre de pression 0-60 cmH ₂ O							●	●	●
Masque en silicone n° 5	●	●	●						
Masque en silicone n° 3				●	●	●			
Masque en silicone n° 1							●	●	●
Masque en silicone n° 0									●
Fixateur rigide pour masques n° 4 et 5	●	●	●						
Fixateur rigide pour masque n° 3				●	●	●			
Masque en PVC n° 6	●	●	●						
Masque en PVC n° 3				●	●	●			
Prolongateur de tube O ₂	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●	●
Valve réservoir d'O ₂		● ●	● ●		● ●	● ●		●	●
Réservoir d'O ₂ 2500 mL		● ●	● ●		● ●	● ●			
Réservoir d'O ₂ 500 mL								●	●
Canule Guedell n° 5			● ●						
Canule Guedell n° 3			● ●			● ●			
Canule Guedell n° 1						● ●			●
Canule Guedell n° 0									●
Étui rigide de transport			● ●			● ●			●

Accessoires et pièces de rechange

Valve PEEP  3200502 5-20 cmH₂O (adulte)  3200501 2-10 cmH₂O (enfant)	 3200630 Manomètre de pression 0-60 cmH₂O (Plus)	 REVIVATOR® Plus 4200601 Valve de patient adulte (Plus) 4200602 Valve de patient enfant/nouveau-nés (Plus)  REVIVATOR® Res-Q 4200701 Valve de patient adulte (Res-Q) 4200702 Valve de patient enfant/nouveau-nés (Res-Q)
 0132117 40 cm  0132108 90 cm  3200619 Adaptateur M22/M23 pour tube annelé  0131344 Harnais  0140015 Anneau de fixation du harnais  4200603 Kit de réparation	 3200050 Étui en nylon avec fermeture éclair	 0200032 Étui rigide en polypropylène (vide)

FABRICANTS
DEPUIS 1973

Puerto de Navacerrada, 3
28935 Móstoles
Madrid, ESPAGNE

Tel.: +34 91 616 6000
info@hersill.com
www.hersill.com



Folieto N°
FR-52006/25/06



DE L'IDÉE
AU PATIENT

REVIVATOR®

Insufflateurs Manuels



REVIVATOR® Res-Q

Silicone + Polycarbonate



REVIVATOR® Plus

Silicone + Polisulfone

REVIVATOR®

Utilisé en réanimation pulmonaire

Insufflateur manuel de manipulation facile, une sensibilité tactile élevée et une longue durée de vie.
La liberté de rotation à 360° du masque et de la valve patient permet une ventilation confortable depuis n'importe quelle position.
Tous les composants sont fabriqués avec des produits de haute qualité, qui ont passé les tests les plus stricts.

REVIVATOR® Plus


- Fabrique en silicone et polysulfone stérilisation chimique à froid et autoclave 135 °C (275 °F).
- Inclut un port pour un manomètre pour contrôler la pression des voies aériennes.

REVIVATOR® Res-Q

- Fabrique en silicone et polycarbonate stérilisation chimique à froid et autoclave 121 °C (250 °C).


Spécifications techniques	Adulte	Enfant	Nouveau-nés
• Insufflateur	1700 mL	750 mL	300 mL
• Volume tidal maxime	1000 mL	500 mL	200 mL
• Soupape de securité limiteur pression	6 kPa = 60 cmH ₂ O	4.5 kPa = 45 cmH ₂ O	4.5 kPa = 45 cmH ₂ O
• Fréquence respiratoire maximale	40 respirations/min	50 respirations/min	90 respirations/min
• Dimensions déplié	130 x 310 mm	103 x 257 mm	80 x 228 mm
• Dimensions plié	90 x 125 mm	85 x 125 mm	
• Poids	341 g	246 g	233 g

Fig. 1

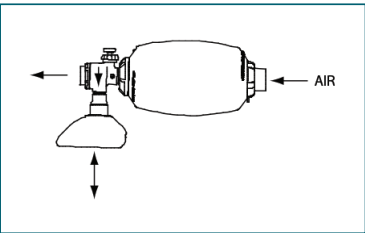


Ventilation contrôlée avec l'air ambiant

Fig. 2

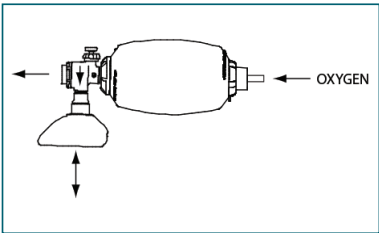


Ventilation contrôlée avec O₂ direct. FiO₂ jusqu'à 57%

Fig. 3

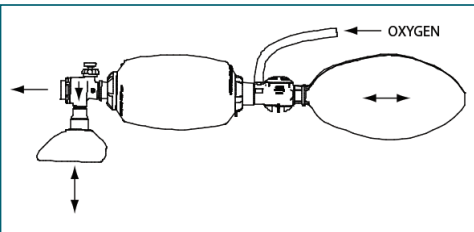

Ventilation contrôlée avec réservoir d'O₂ 100%. FiO₂ jusqu'à 100%

Fig. 4

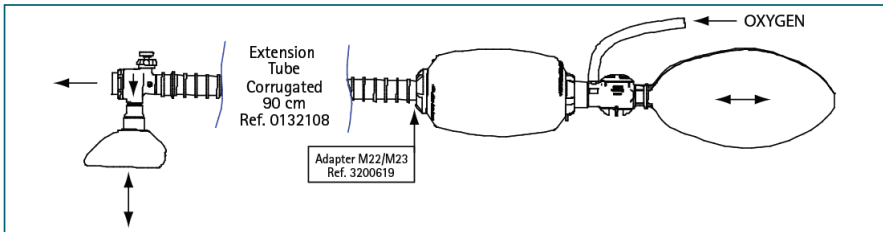

Autres configurations

- Ventilation avec valve PEEP régulière (adulte et enfant).




- Contrôle de la pression de la voie aérienne par manomètre. Inclus dans REVIVATOR® Plus Nouveau-nés et optionnel dans REVIVATOR® Plus adulte et enfant.



- Connecteur de manomètre. Seulement en REVIVATOR® Plus.



REVIVATOR® Plus

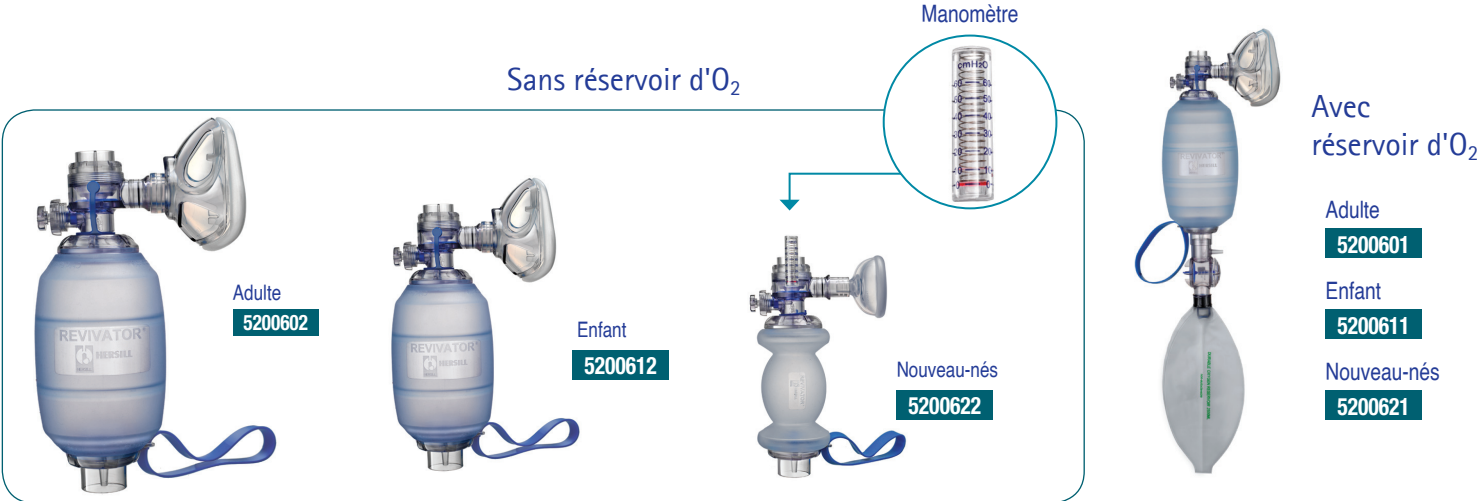

Plus

4200605 Valve réservoir d'O₂ pour adulte et enfant

REVIVATOR® Res-Q




Masques en silicone



Dômes rigides en polysulfone pour masques, pour une fixation plus sûre

Masques en PVC

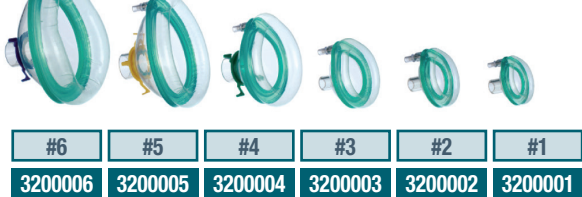

500 mL
3200505
Nouveau-nés



2500 mL
3200504
Adulte
Enfant