



Aspirateurs portables





Avec bocal de recueil PC1

	V7 ac	V7 dc	V7 plus ac	V7 plus dc	V7 plus b	V7 plus b emergency	V7 mx	V7 g
Avec bocal de recueil PC1	5320201 5321201	5320211	5320241 5321241	5320251	5320261	5320281	5320236	5320271
Avec bocal de recueil PC2	5320202 5321200	5320212	5320242 5321240	5320252	5320262	5320282	5320237	5320273
Alimentation	220 V _{ac} 50H _z 110 V _{ac} 60H _z	12V _{dc}	220 V _{ac} 50H _z 110 V _{ac} 60H _z	12V _{dc}	12V _{dc} Batterie	12V _{dc} Batterie	100/240 V _{ac} 12V _{dc} Batterie	100/240 V _{ac} 12V _{dc} Batterie
Débit libre d'air aspiré	20 L/min	14 L/min	30 L/min	30 L/min	30 L/min	30 L/min	30 L/min	5 L/min Continu/ Intermittent
Vide maximum	80 kPa 600 mmHg	75 kPa 562 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	84 kPa 630 mmHg	20 kPa 150 mmHg
Puissance électrique	250 W	18 W	120 W	85 W	85 W	85 W	160 W (ac) 84 W (dc)	35 W (ac) 30 W (dc)
Batterie interne					12 V - 4,5 Ah Ac-Pb 65 min	12 V - 4,5 Ah Ac-Pb 65 min	12 V - 4,5 Ah Ac-Pb 65 min	12 V - 1,3 Ah Ac-Pb 120 min
Chargeur batterie AC interne							✓	✓
Chargeur batterie AC/DC externe					Optionnel	Optionnel		
Support au mur xg (testé à 10g), sur les modèles V7 plus b, avec alimentation 12 V						✓		
Cable 12/24 V pour ambulance		✓		✓	✓	✓	✓	✓
Filtre antibactérien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niveau de bruit	49 ± 1,5 dB (AS) / 1 m							
Poids	3 Kg	2,2 Kg	3,5 Kg	2,5 Kg	4,2 Kg	4,2 Kg	4,5 Kg	2,5 Kg
Dimensions	Hauteur 250 mm		Largeur 395 mm avec bocal de recueil PC1 428 mm avec bocal de recueil PC2			Profondeur 160 mm		
Espace nécessaire pour loger dans une ambulance, avec support xg	290 mm		395 mm avec bocal de recueil PC1 428 mm avec bocal de recueil PC2			168 mm		
Dimensions emballage	460 x 210 x 290 mm (L x P x H)							



V7 plus ac



V7 g



Aspirateurs portables de haute qualité et haute performance.

Grâce à leur polyvalence, ils peuvent être utilisés dans les hôpitaux, les ambulances, les thérapies à domicile et autres services d'urgence. Convient pour la chirurgie, la gynécologie et les ORL.

Aspirateurs à fort vide: haut débit (30 L/min), faible débit (14 ou 20 L/min), selon le modèle.

Aspirateur à faible vide: **V7 g** Continu-Intermittent (5 L/min). Spécialement développé pour le drainage gastrique et le drainage des blessures, ainsi que pour les thérapies nécessitant des conditions précises de faible vide.

V7 plus b, **V7 plus b emergency** et **V7 mx** sont spécialement conçus pour l'ambulance, le transport et l'utilisation sur les urgences.

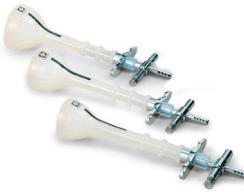
- **Carcasse ergonomique en ABS.** Système de fixation postérieur pour support au mur testé pour résister à des accélérations et décélérations de 10g en direction longitudinale, transversale et verticale (conforme à la norme européenne UNE-EN-1789: 2000).
- **Pompe de piston (V7g: pompe à membrane).** Tous les modèles sans huile et sans entretien.
- **Bouton de commande régulateur de vide (V7g: bouton de commande du programmeur d'intermittence et bouton de commande du vide).**
- **Vacuomètre à vide** 0-100 kPa / 0-760 mmHg. (V7g: écran de vide 0-20 kPa (0-150 mmHg).
- **Interrupteur ON / OFF étanche avec protecteur.**
- **Batterie:** Voyants lumineux LED de niveau de batterie (inclus dans tous les modèles avec batterie).
- **Bocal de recueil PC1 de 1 L (polycarbonate), avec valve de sécurité antidébordement.** Autoclavable jusqu'à 121 °C. (Veuillez consulter notre section accessoires pour d'autres configurations*).
- **Filtre antibactérien et tuyaux d'aspiration inclus** (tubes PVC 8 x 13 mm). 2 m au tuyau patient.
- **Canule Yankauer.**
- **V7g: voyants LED:** ON, intermittent, niveau de vide, indicateur de vide et état de la batterie. Bouton de commande du programmeur d'intermittence et bouton de commande du vide.



Support au mur xg

* Les aspirateurs V7 sont compatibles avec les principales marques de systèmes d'aspiration à usage unique dans le monde entier (veuillez vérifier la disponibilité)

Accessoires et pièces de rechange

 4320290 Support mural de base	 4320301 Support mural xg 4320300 Support mural xg avec alimentation 12 V (seulement pour V7 plus b emergency)
 4320021 Support roulant 3383007 Porte-sondes (polycarbonate)	 Bocal de recueil 4383001 PC1 (polycarbonate, 1 L) 4383000 PSU1 (polysulfone, 1 L) Poches d'aspiration jetables disponibles, veuillez consulter  Bocal de recueil 4383002 PC2 (polycarbonate, 1.75 L) 4383012 PSU2 (polysulfone, 1.75 L) Poches d'aspiration jetables disponibles, veuillez consulter
 4320032 Câble 12/24 V pour ambulance	 4320033 Chargeur batterie 220-12 V
 3320223 Sac de transport	 0320014 Housse de transport utilisable avec un support mural de 10g
 4340001 Cathéter droit métallique 4340002 Cathéter courbe métallique 4340000 Manche cathéter métallique	 0340015 Ventouses obstétricales en silicone 50 mm 0340016 Ventouses obstétricales en silicone 60 mm 0340017 Ventouses obstétricales en silicone 70 mm
 0940023 Tube PVC (per mètre, rouleau de jusqu'à 50 m)	 3320534 Filtre bactérien hydrophobe
 0310017 Canule Yankauer à usage unique + 2 tube d'aspiration 2 m	 Support canister compatible avec les principales marques de canisters à usage unique (veuillez consulter)



HERSILL

Équipements Médicaux

HERSILL, S.L.
Puerto de Navacerrada, 3 • Polígono Industrial Las Nieves
28935 Móstoles (Madrid) ESPAGNE
Tel.: +34 91 616 60 00 • Fax: +34 91 616 48 92
info@hersill.com • export@hersill.com
www.hersill.com



ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 14001: 2015



ISO 10079-1:2015
EN IEC 60601-1:2006
EN IEC 60601-1-2:2007
EN IEC 60601-1-6:2010
EN 1789:2007+A1:2014