



						
L/min	SS8752430	BS 5682	NF 90 116	Oxifar	DIN 13260	
O ₂						
0-15 Rail	55400005450001	55400025450002	55400035450004	55400055450006	55400065450007	
0-15 dual Rail	55400505450051	55400525450052	55400535450054	55400555450056	55400565450057	
0-15 selector Rail	55406005450601	55406025450602	55406035450604	55406055450606	55406065450607	
0-15 selector dual Rail	55406205450621	55406225450622	55406235450624	55406255450626	55406265450627	
Air						
0-15 Rail	55403005450311	55403025450312	55403035450314	55403055450316	55403065450317	
0-15 dual Rail	55403505450301	55403525450302	55403535450304	55403555450306	55403565450307	
0-15 selector Rail	55406505450631	55406525450632	55406535450634	55406555450636	55406565450637	
0-15 selector dual Rail	55406405450641	55406425450642	55406435450644	55406455450646	55406465450647	

Connexions spéciales disponibles sur demande. Consulter.

						
DISS	CHEMETRON	OHMEDA	PURITAN	UNI	AFROX	ENV 737-6

Accessoires

	Pièce sélecteur. <i>Dispositif adaptable à n'importe quel débitmètre avec sortie DISS 9/16"-18 UNF. D'un simple tour, sélectionnez la sortie du flux à travers l'humidificateur ou à travers la tétine pour connecter des masques ou des nébuliseurs.</i>		4540610
	Humidificateur stérilisable. <i>Type bulle avec diffuseur, stérilisable en autoclave à 121 °C. Flacon en polycarbonate et couvercle en polyamide. Capacité: 350 mL.</i>		5530000
	Humidificateur stérilisable avec soupape de surpression. <i>Type bulle, avec diffuseur et soupape de surpression, stérilisable en autoclave à 121 °C. Flacon en polycarbonate et couvercle en polyamide. Capacité: 350 mL.</i>		5530002
	<i>Connecteur DISS 9/16"-18 UNF métallique pour tube O₂.</i> <i>Connecteur DISS 9/16"-18 UNF en plastique pour tube O₂.</i>		4905400 0520101
	<i>Masque O₂ à usage unique.</i>	Adulte	3210221
		Enfant	3210220
	<i>Canule nasale O₂ à usage unique.</i>		0930001
	<i>Masque à O₂ avec nébuliseur à usage unique.</i>	Adulte	0930005
		Enfant	0930006
	<i>Masque O₂ avec différentes concentrations à usage unique.</i>		0930013
	<i>Système d'accouplement sur rail pour débitmètres, avec raccordement à canalisation (le type de connexion doit être spécifié par le client) ente). Consulter.</i>		4450050

Standards: ISO 15002:2008

Puerto de Navacerrada, 3
28935 Mostoles
Madrid, ESPAGNE

Tel.: +34 91 616 6000
info@hersill.com
www.hersill.com



Brouchure No.
FR-4540/24-07

Débimètres



Légers
Faciles à utiliser
Très efficaces
Précis




DE L'IDÉE
AU PATIENT

Oxyl[®]

Ces débitmètres sont capables de compenser les variations de pression de la canalisation car ils admettent toute la pression de la ligne, maintiennent la pression et fournissent au patient le débit sélectionné, à la pression atmosphérique, par l'intermédiaire de la masque, canules nasales, nébuliseur, humidificateur, etc...

Leur mise à l'échelle permet une visibilité de la sélection de écoulement à partir d'un angle allant jusqu'à 180°.

Caractéristiques techniques	Oxyl	Oxyl selector	Oxyl dual
Dimensions	27 X 148 mm	63 x 154 mm	135 X 148 mm
Poids	164 g	210 g	504 g
Options de gaz	O ₂ et Air		
Connexion de sortie	DISS O ₂ 9/16" - 18 UNF (sélecteur : également sortie pour tube O ₂ 6 mm)		
Pression d'entrée	4,5 ± 0,5 bar / 65 ± 0,7 psi / 450 ± 50 kPa		
Échelles à partir de L/min	0-5 0-15 0-30 0-70		

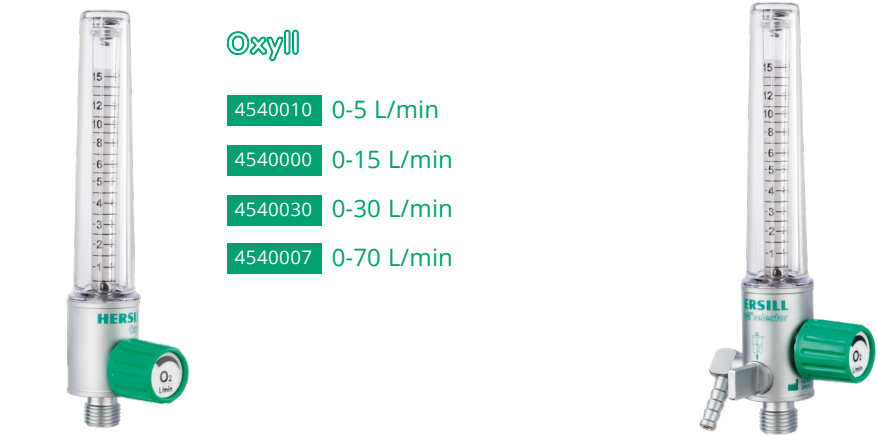

Combinaisons de débitmètres configurables avec échelles:
0-5 L/min, 0-15 L/min, 0-30 L/min et 0-70 L/min



Corps et sortie DISS en laiton chromé mat, commande de régulation en polyamide, tube extérieur et intérieur en polycarbonate, bille d'acier inoxydable. Sans latex.

Les débitmètres **selector** ont été conçus pour économiser temps et O₂. Pour le raddordement d'un nébuliseur ou alimentation en oxygène non humidifié, disposent d'une commande rotatif qui vous permet de commuter entre la sortie directe à la masque, dispositif de nébulisation ou humidificateur, sans interrompre l'alimentation en O₂ pendant cette opération.

Perflow[®]

Ces débitmètres offrent plus de confort et the de sécurité contre les changements accidentels de débit grâce à leur conception à trous calibrés de haute précision et une commande de réglage "click". Fenêtre indicateur de débit sélectionné de gran diamètre et haute visibilité.

Les débitmètres ont été conçus pour gagner du temps et de l'O₂. Pour le raccordement d'un nébuliseur ou d'une alimentation en oxygène sans humidification, ils sont équipés d'une commande rotative qui permet de commuter entre la sortie directe sur le masque, dispositif de nébulisation ou à l'humidificateur, sans interrompre l'alimentation en O₂ pendant cette opération. Corps en aluminium chromé mat, commande de réglage en ABS, sortie DISS en laiton chromé mat. Sans latex.

Perflow P4 y P5

P4 y P5 selector

Perflow multy y multy selector



OX1	0-1 L/min	0	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
OX5	0-5 L/min	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5
OX15 / AIR15	0-15 L/min	0	0,2	0,5	0,7	1	1,5	2	3	4	5	7	10	12	15
OX50 / AIR50	0-50 L/min**	0	1	3	5	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50
OX5 SELECTOR	0-5 L/min	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5
OX15 SELECTOR	0-15 L/min	0	0,2	0,5	0,7	1	1,5	2	3	4	5	7	10	12	15
	FX1 O ₂ /AIR	FX2 O ₂ /AIR			FX3 O ₂ /AIR		FX5 O ₂ /AIR		FX8 O ₂ /AIR		FX10 O ₂ /AIR		FX15 O ₂ /AIR		
	0 - 1 L/min	0 - 2 L/min			0 - 3 L/min		0 - 5 L/min		0 - 8 L/min		0 - 10 L/min		0 - 15 L/min		

* Débit étalonné en conditions STP (23° C - 101,3 kPa) ** La débitmètre Perflow* de 0-50 L/min est indiqué pour la CPAP

Perflow P4 air

Perflow P4 dual

Perflow multy rail

					
Caractéristiques techniques	P4 et P5	Selector P4 et P5	Multy	Multy Selector	
	Dimensions	37 x 56 mm	38 x 79 mm	38 x 65 mm	38 x 88 mm
	Poids	98 g	190 g	112 g	200 g
	Options de gaz	O ₂ et Air			
	Connexion de sortie	DISS O ₂ 9/16" - 18 UNF			