


EuroVac®

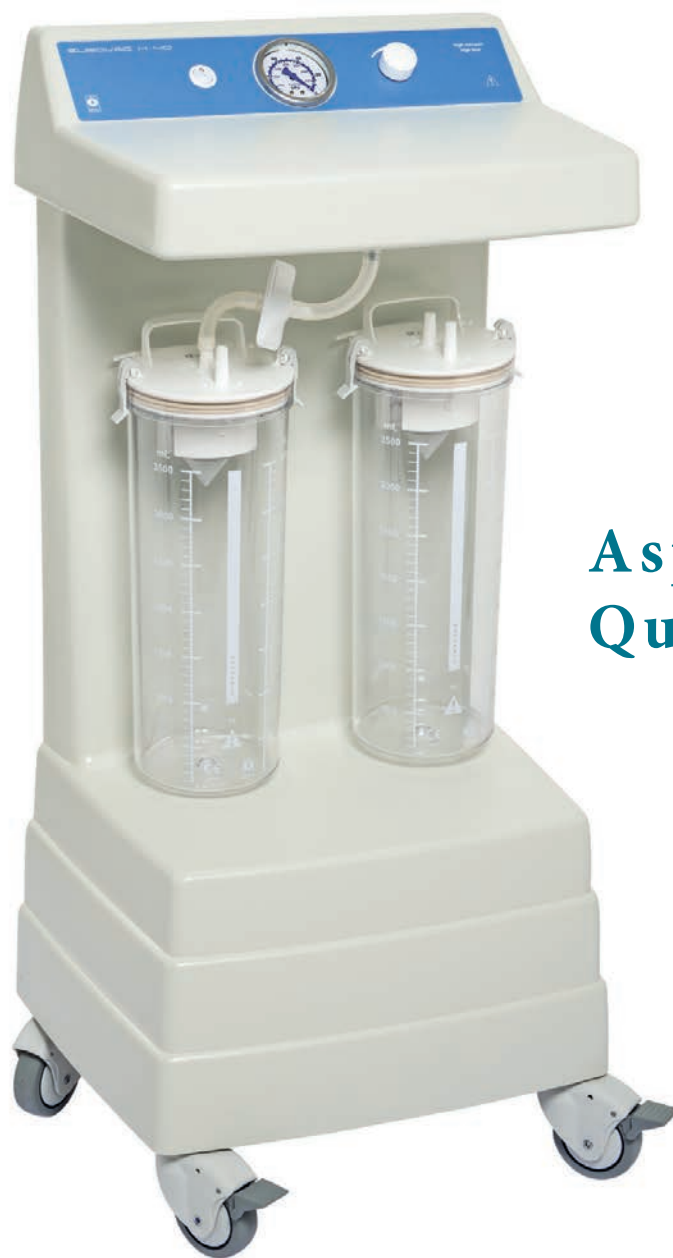

**Aspiradores
Quirúrgicos**

H-40 H-50

EuroVac®



1 frasco recolector

H-40 5320545

H-50 5320555

2 frascos recolectores

H-40 5320546

H-50 5320556

- **Diseño compacto (chasis en ABS de alta resistencia reforzado con aluminio)** sobre cuatro ruedas de Ø80 mm (una antiestática y dos con freno).
- **Bomba de vacío** tipo pistón de larga duración y libre de aceite. No requiere mantenimiento.
- **1 ó 2 frascos recolectores de policarbonato** (4 litros – escala hasta 3500 mL), con válvula de seguridad para prevenir el sobrellenado y esterilizables en autoclave 121 °C. Soporte frasco recolector de acuerdo con norma: EN 19054.
- **Filtro de bacterias hidrofóbico**, fabricado en PTFE. Garantiza la retención de partículas con una eficacia del 99% y bacterias del 99.99%.
- **Botón On/Off.**
- **Mando de regulación de vacío** preciso y estable.
- **Vacuómetro** de precisión de alto vacío (0-100 kPa / 0-760 mmHg) de gran visibilidad (Ø67 mm).
- **Alojamiento para cable eléctrico de 3m.**

Ficha técnica:

	<i>H-40</i>	<i>H-50</i>
*Caudal máximo bomba	40 L/min	90 L/min
*Vacío máximo	85 kPa - 850 mbar - 640 mmHg	90 kPa - 900 mbar - 675 mmHg
Nivel de sonido	50±1,5 dB(AS)/1 m	
Potencia	180 W	250 W
Intensidad	0,9 A	1,3 A
Tensión	200 - 240 V _{AC} (50-60 Hz) * Disponibles 100 - 120 V _{AC}	
Dimensiones	960 x 430 x 340 mm - Embalado: 990 x 495 x 380 mm	
Peso	21,7 kg - Embalado: 25,3 kg	23,8 kg - Embalado: 27,2 kg
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a 70 °C	-40 °F a 158 °F
Temperatura de funcionamiento	7 °C a 40 °C	44 °F a 104 °F
Normativa	ISO 10079-1 IEC 60601: Clase I, Tipo BF, IP22	

*±5% medido a 230 V / 60 Hz

Opcional:

- **Mando selector** del frasco activo con 2 posiciones para aspirador de doble frasco.



- **Pedal** electro-neumático **On/Off**.



- **Frasco recolector de polisulfona** (4 litros - escala hasta 3500 mL).

Referencias para pedidos:

Accesorios

3383007 Lava-sondas / recipiente de residuos PC 14 x 35 cm



0340015 Ventosa obstétrica silicona 50 mm

0340016 Ventosa obstétrica silicona 60 mm

0340017 Ventosa obstétrica silicona 70 mm



4320551 Kit pedal electro-neumático On/Off



0940023 Tubo PVC 8 x 13 mm (1 m)

0940061 Tubo silicona 8 x 13 mm (1 m)

0310017 Cánula Yankauer + tubo aspiración PVC 2 m (8 x 13 mm)

4320510 Mando intercambiador para 2 frascos



4383004 Frasco recolector PC4 de 4 L policarbonato

4383014 Frasco recolector PSU4 de 4 L polisulfona (opcional)

Repuestos

3383004 Frasco recolector PC4 sin tapa de 4 L policarbonato

4383010 Tapa frasco recolector PC4 de 4 L policarbonato

3383014 Frasco recolector PSU4 sin tapa de 4 L de polisulfona

4383011 Tapa frasco recolector PSU4 de 4 L polisulfona

3383030 Kit flotador PSU para frascos recolectores PC/PSU, con junta de sellado

3320534 Filtro de bacterias hidrofóbico, espiga-espiga

3320545 Cable de alimentación de 3 m



FABRICANTES DESDE 1973

Puerto de Navacerrada, 3
28935 Móstoles,
Madrid, ESPAÑA

T: +34 91 616 6000
info@hersill.com
www.hersill.com



ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001

